UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREȘTI DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ

LABORATORUL DE OPTICĂ BN - 120 B

STUDIUL INTERFERENȚEI LUMINII CU DISPOZITIVUL LUI YOUNG

STUDIUL INTERFERENȚEI LUMINII CU DISPOZITIVUL LUI YOUNG

1. Scopul lucrării

Studiul interferenței luminii, determinarea lungimii de undă a unei radiații luminoase cvasimonocromatice.

2. Teoria lucrării

Fenomenul de interferență constă în suprapunerea a două sau mai multe unde coerente. În optică, acesta se materializează prin apariția unui sistem de franje luminoase și întunecate.

Să considerăm două unde electromagnetice, monocromatice, plane, caracterizate prin aceeași frecvență unghiulară ω și același vector de undă $k=2\pi/\lambda$. Intensitățile cîmpului electric al celor două unde variază în timp și spațiu conform relațiilor:

$$E_1 = E_{01}e^{i\varphi_1} = E_{01}e^{i(k\,r_1 - \omega t + \varphi_{01})}, \quad E_2 = E_{02}e^{i\varphi_2} = E_{02}e^{i(k\,r_2 - \omega t + \varphi_{02})}$$
(1)

unde E_{01} și E_{02} sînt amplitudinile constante, iar φ_1 și φ_2 sînt fazele undelor.

Dacă diferența de fază $\Delta \phi = \phi_2 - \phi_1$ rămâne constantă în timp se spune că undele sînt **coerente**. Ca rezultat al suprapunerii celor două unde se obține o undă rezultantă caracterizată prin intensitatea cîmpului electric:

$$E^{2} = E_{01}^{2} + E_{02}^{2} + 2E_{01}E_{02}\cos[k(r_{1} - r_{2}) + (\varphi_{01} - \varphi_{02})] = E_{01}^{2} + E_{02}^{2} + 2E_{01}E_{02}\cos(k\Delta r + \Delta\varphi)$$
(2)

Din teoria electromagnetismului se știe că intensitatea I a unei unde, măsurată eventual în W/m^2 , este proporțională cu pătratul amplitudinii intensității cîmpului electric. Rezultă că intensitatea undei rezultante va fi:

$$I \approx E^2 = E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2E_{01}E_{02}\cos(k\Delta r + \Delta\varphi)$$
 (3)

Termenul $2E_{01}E_{02}\cos(k\Delta r + \Delta \varphi)$ din relația (3) se numește termen de interferență. Existenta sa face ca intensitatea observată să ia valori cuprinse între o valoare minimă:

$$I_{\min} \approx (E_{01} - E_{02})^2$$

și o valoare maximă:

$$I_{\text{max}} \approx \left(E_{01} + E_{02}\right)^2.$$

În practică, pentru ca diferența de fază $k\Delta r + \Delta\phi_0$ să rămînă constantă în timp, este necesar ca iluminarea surselor S_1 și S_2 să provină de la o sursă unică, S_0 . În caz contrar, întrun interval de timp egal cu durata de observare, sînt emise foarte multe trenuri de unde de către sursele S_1 și S_2 , astfel încît diferența de fază ia toate valorile posibile, anulînd, în medie, termenul de interferență.

Una dintre cele mai vechi demonstrații ale faptului că lumina poate produce efecte de interferență a fost făcută în 1800 de către savantul englez Thomas Young.

Dispozitivul lui Young este prezentat în figura 1.

Lumina monocromatică, provenind de la fanta îngustă S_0 este împărțită în două cu ajutorul unui ecran în care sînt practicate două fante dreptunghiulare, înguste, foarte apropiate, S_1 și S_2 . Conform principiului lui Huygens, de la fanta S_0 pornesc unde cilindrice, care ajung la fantele S_1 și S_2 în același timp. Apoi, de la fiecare fantă, va porni cîte un tren de unde Huygens; deci fantele se comportă ca surse coerente.

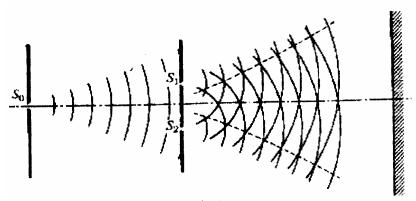
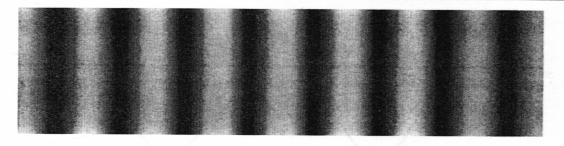


Fig. 1.

Fie d - distanța dintre fante și P - un punct pe ecranul de observare, într-o direcție care formează un unghi θ cu axa sistemului (figura 2). Cercul cu centrul în P, avînd raza PS_2 , intersectează PS_1 în PS_2 in PS_2 intersectează PS_1 în PS_2 in PS_2 intersectează PS_1 în PS_2 intersectează PS_2 in PS_2 intersectează PS_2 in PS_1 . Atunci triunghiul PS_1 este un triunghi dreptunghic, asemenea cu PS_2 in PS_1 . Atunci triunghiul PS_1 este un triunghi dreptunghic, asemenea cu PS_2 intersectează cu distanța PS_1 este egală cu distanța este diferența de drum dintre undele de la cele două fante, care ajung în PS_1 undele care se propagă din PS_1 in PS_2 pornesc în concordanță de fază, dar pot să nu mai fie cu fază în PS_1 datorită diferenței de drum. În punctul PS_1 se va obține un maxim dacă diferența de drum a celor două unde este egală cu un număr întreg de lungimi de undă, PS_1 PS_2 in PS_2 in PS_3 in PS_4 in PS_4

$$d\sin\theta = m\lambda$$
 unde $m = 0, 1, 2, 3$. (4)



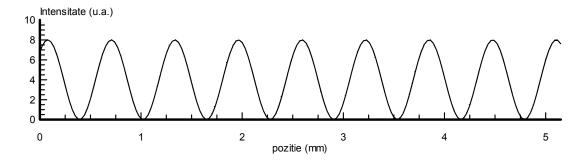


Fig. 2.

Franja centrală luminoasă din punctul O corespunde unei diferențe de drum nule, adică $\sin \theta = 0$. Distanța y_m dintre franja de ordinul zero și punctul P aflat în centrul celei de-a m - a franje este:

$$y_m = R \operatorname{tg} \theta_m \tag{5}$$

deoarece pentru toate valorile lui m unghiul θ este foarte mic, $tg\theta_m \approx \sin\theta_m$ și rezultă:

$$y_m = R\sin\theta_m = R\frac{m\lambda}{d} \,. \tag{6}$$

Știind că interfranja este distanța dintre două maxime (sau minime) consecutive rezultă că


$$i = y_{m+1} - y_m = \frac{\lambda R}{d}. \tag{7}$$

Pe ecran se obține un sistem de franje ca acela prezentat in Fig. 2, s-a prezentat și distribuția de intensitate luminoasă :

3. Dispozitivul experimental

Prezentat în figura 4, dispozitivul experimental cuprinde un bec electric O alimentat direct de la rețea și următoarele subansamble - fixate pe suporți, care pot culisa pe bancul optic B.O:

- fanta F₀ dreptunghilară, cu deschidere reglabilă (joacă rolul sursei S₀).
- fantele F_1 și F_2 dreptunghiulare, verticale și paralele cu deschidere fixă, realizate sub forma a două trăsături transparente pe o placă de sticlă înnegrită.

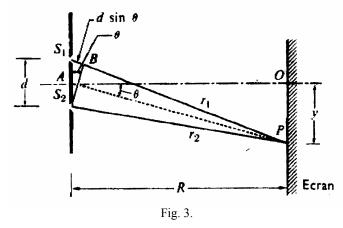

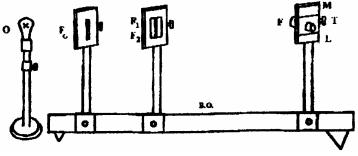


Fig. 4.

Pe placă este notată distanța d dintre fante.

- subansamblul pentru măsurarea interfranjei, alcătuit dintr-un filtru optic F, o lupă L de observare a sistemului de franje,un șurub micrometric M de care este atașat solidar tamburul gradat T și un fir reticular.

4. Modul de lucru

Se iluminează fanta F care este relativ deschisă (1 - 2 mm). Se reglează pozițiile fantelor F_1 și F_2 și poziția lupei, aducîndu-se în linie dreaptă cu fanta F, la aceeași înălțime, utilizînd, eventual, o foaie de hîrtie drept ecran. Privind prin lupă, se micșorează deschiderea fantei F, astfel încît franjele de interferentă să fie clare. Se măsoară distanta R.

Se potrivește firul reticular pe centrul unei franje și se notează poziția x_1 a indicatorului rigletei și poziția y_1 a indicatorului tamburului. Se rotește tamburul trecînd cu firul reticular peste un număr N de franje (5 - 8) după care se notează N și noile poziții ale indicatoarelor x_2 și y_2 .

Pentru a evita pasul mort al șurubului, se recomandă ca aducerea firului reticular la poziția inițială să se facă în același sens în care urmează să se facă ulterior parcurgerea franjelor.

Pentru o valoare fixată a lui R se fac 10 măsurători ale interfranjei.

Datele se trec într-un tabel de forma:

	Datele se tree mu-un tabel de forma.									
R (cm)	x_1 (div)	y ₁ (div)	N	x_2 (div)	y ₂ (div)	i (mm)	ī (mm)	$\sigma_{ar{i}}$	$\frac{\overline{\lambda}}{(nm)}$	$\sigma_{\overline{\lambda}}$
							-			
-										

Se modifică interfranja apropiind sau îndepărtînd lupa de fantele F_1 și F_2 . Se fac încă 5 măsurători ale interfranjei pentru o distanță și 5 măsurători ale interfranjei pentru o altă distantă.

5. Prelucrarea datelor si calculul erorilor

5.a Se calculează cele 10 (respectiv 5) valori ale interfranjei la fiecare R fixat. Se determină media aritmetică \bar{i} a rezultatelor. Se introduce valoarea medie în relația (7), determinîndu-se în acest fel $\bar{\lambda}$.

Se calculează abaterea pătratică $\sigma_{\bar{i}}$ cu formula:

$$\sigma_{\bar{i}} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{n} (i_k - \bar{i})^2}{n(n-1)}},$$
(8)

unde n este numărul de măsurători, egal cu 10 (respectiv 5) în cazul de față.

Se calculează abaterea pătratică a mediei σ_{λ} cu formula de propagare a erorilor.

$$\sigma_{\overline{\lambda}}^{2} = \left(\frac{\partial \lambda}{\partial i}\right)^{2} \begin{vmatrix} i = \overline{i} \\ R = \overline{R} \end{vmatrix} \sigma_{\overline{i}}^{2} + \left(\frac{\partial \lambda}{\partial R}\right) \begin{vmatrix} i = \overline{i} \\ R = \overline{R} \end{vmatrix} \sigma_{\overline{R}}^{2}$$
(8)

în care $\sigma_{\bar{i}}^2$ se obține cu relația (7) iar pentru evaluarea lui $\sigma_{\bar{R}}$ se va considera că eroarea de măsură cu o scară gradată este egală cu jumătate din valoarea celei mai mici diviziuni. Derivatele parțiale din relația (8) se calculează folosind relația:

$$\lambda = \frac{id}{R}$$
,

în care d se consideră constantă și egală cu valoarea indicată pe suportul fantelor. Rezultatul final se va da sub forma: $\lambda = \overline{\lambda} \pm \sigma_{\overline{\lambda}}$

5.b Se reprezintă grafic dependența interfranjelor medii obținute mai sus în funcție de distanțele dintre planul celor două fante și ecranul de observație (lupa), ținîndu-se cont și de abaterile pătratice calculate mai sus. Lungimea de undă se determină din panta dreptei trasate pentru a reproduce cît mai bine dependența liniară teoretică dată de ecuația 7.

Întrebări

- 1. Care este fenomenul principal studiat cu ajutorul dispozitivului lui Young?
- 2. Desenați schema simplificată a dispozitivului experimental utilizat.
- 3. Care sint condițiile de coerență a undelor descrise de ecuațiile: $\Psi_1 = a_1 \cdot e^{i(\omega_1 t k_1 r + \varphi_1)}$ și $\Psi_2 = a_2 \cdot e^{i(\omega_2 t k_2 r + \varphi_2)}$?
- 4. Ce este o undă monocromatică? Cum se obține lumina monocromatică pentru studiul interferenței cu dispozitivul lui Young?
- 5. Ce reprezintă lungimea de undă? Dar frecvența undei? În ce relație se găsesc ele?
- 6. Ce sînt franjele de interferență? Ce este interfranja? Cum a fost determinată experimental?
- 7. Care este definiția vizibilității franjelor de interferență și semnificația sa?
- 8. Care este semnificația mărimilor din ecuația $\lambda = \frac{d \cdot i}{l}$?
- 9. Descrieti si desenati figura văzută prin lupă.